



Шаг 6

Через 15 минут (не более 30 минут)
оцените результат:

отрицательный – проявление
одной полосы – в зоне «С»:

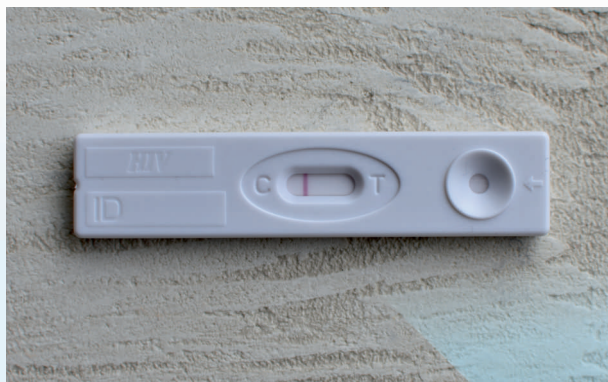

положительный – проявление
двух полос – в зонах «С» и «Т»:

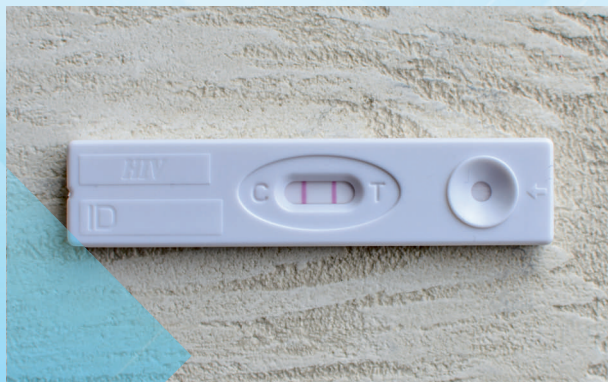

недействительный – отсутствие полос либо
проявление полосы только в зоне «Т»:



Получить консультацию, дополнительную информа-
цию по вопросам ВИЧ-инфекции и психологическую
помощь можно в ГУ «Витебский ОЦГЭ и ОЗ», отдел
профилактики ВИЧ-инфекции и ПВГ (г. Витебск,
ул. В.-интернационалистов, 37а).

Телефоны:

+375 212 67 98 72

+375 212 48 08 08 (психолог)

e-mail: profaids@vitebsk.by




ГУ «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
отдел профилактики ВИЧ-инфекции
и парентеральных вирусных гепатитов



САМОТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ПО СЛЮНЕ

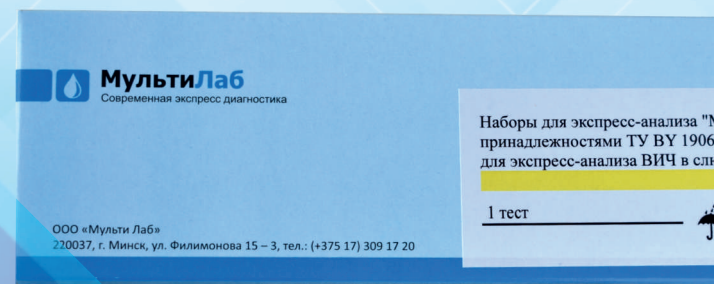

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?

ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Человек не может почувствовать, попал ВИЧ в его организм или нет.

Тест на ВИЧ – это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение. Тестирование можно провести в домашних условиях с использованием экспресс-теста на ВИЧ по слюне.

Для того, чтобы результат экспресс-тестирования был надежным, с момента предполагаемого инфицирования должно пройти **не менее 10-12 недель**.

Шаг 1

Вскройте упаковку со стерильным тампоном.
Извлеките тампон, касаясь только палочки.



Шаг 2

Проведите одной стороной тампона вдоль верхней десны от одного угла рта в другой и в обратном направлении (в течение 5-6 секунд).



Шаг 4

Поместите тампон во флакон с раствором.
Совершите движения вверх-вниз 6-8 раз.



Шаг 3

Переверните тампон. Проведите вдоль нижней десны от одного угла рта в другой и в обратном направлении (в течение 5-6 секунд).



Шаг 5

Извлеките тест-кассету из упаковки.
Наберите пипеткой раствор из флакона.
Нанесите 4 капли в лунку.

